

IGH Break Apart DNA-FISH Probe

Sonde "Break Apart", Bicolore

REF 13-014




Mode d'emploi



Usage prévu

La sonde DNA-FISH dite «Break Apart» IGH de Cancer Genetics Italia est conçue pour détecter les translocations impliquant le locus de la chaîne lourde de l'immunoglobuline (IGH) sur le chromosome 14q32.3 par hybridation *in situ* en fluorescence (FISH/Fluorescence *in situ* hybridization). Au moins 40 gènes partenaires de translocation du locus IGH ont été identifiés.^[1] On trouve des réarrangements impliquant le locus IGH et des partenaires spécifiques principalement dans des cas myélome multiple (MM),^[2,3] et des sous-types de lymphome non-hodgkinien.^[4,5] Le pronostic dépend du partenaire de translocation et du type de tumeur. La sonde DNA-FISH «Break Apart» IGH permet la visualisation de la cassure entre le domaine C (rouge) et le domaine V (vert) du locus IGH et la translocation résultante.

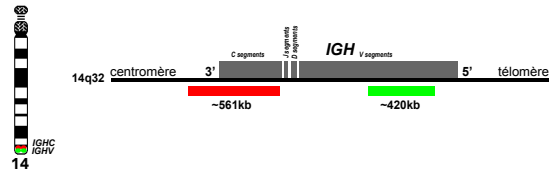

Représentation schématique de la sonde DNA-FISH IGH «Break-Apart»:

Les barres horizontales rouges et vertes indiquent la zone couverte par chaque sonde (approximativement à l'échelle, NCBI 36.1/HG18/2006). Les sondes 5' IGHV (green) and 3' IGH C (red) directement marquées bordent les points de cassure communément trouvés dans les neoplasmes à cellule B.

Conservation

À l'arrivée, conserver le produit à -20°C, à l'abri de la lumière, jusqu'à la date de péremption.

Conservation des lames : Conserver les lames hybridées à -20°C, à l'abri de la lumière.

Remarque: Ces conditions de conservation s'appliquent à la fois aux produits non ouverts et ouverts. Le nombre de cycles de gel-dégel ne doit pas dépasser le nombre de tests recommandés par flacon. Conserver dans le flacon d'origine. Les flacons conservés dans d'autres conditions peuvent ne pas offrir de performance optimale et par conséquent affecter les résultats du test.

Manipulation

- » Tous les réactifs doivent être manipulés comme s'ils étaient capables de transmettre des agents infectieux. Après usage, tout le matériel doit être éliminé conformément à la loi nationale en vigueur.
- » Manipuler tous les réactifs et lames contenant des fluorophores en éclairage réduit, afin d'éviter toute détérioration du signal fluorescent.

Réactif fourni

Sonde DNA-FISH prête à l'emploi : 100 µL par flacon (10 tests). Un test est défini comme suffisant pour une aire de 22mm x 22mm.

Sonde étiquetée au fluorophore pour le locus 3' IGH (rouge) et au fluorophore pour le locus 5' IGH (vert), prémélangée avec de l'ADN bloquant et un tampon d'hybridation (formamide, sulfate de dextran, SSC et SDS).

Réactifs et matériel nécessaire mais non fournis

Equipements

Bocal coplin	Microcentrifugeuse
Lamelles couvre-objets (22x22 et 25x25)	Microtube à centrifuger (0,5 mL)
Microscope à épifluorescence	Micropipettes (1 à 200 mL)
Pincettes	pH-mètre
Hotte aspirante	Colle de caoutchouc
Gants	Plateau pour lames
Chambre humidifiée	Thermomètre, calibré (37°C to 80°C)
Huile d'immersion	Plaque chauffante
Incubateur	Bain-marie
Lampe à mercure (100 watts)	

Reactifs

Étanol à 100%
PBS 10X
HCl 1N
MgCl ₂ 1M
NaOH 1M
SSC 20X
Formaline à 10%
DAPI et Antifade
Eau distillée
Pepsine
Tween 20

Avertissements et mises en garde

Lire le mode d'emploi avant toute utilisation.

- » Tout transport ou conservation impropre peut détruire ou détériorer la performance du produit.
- » En cas de réception d'emballage ou de flacon endommagé, de défaillance du dispositif (après utilisation conforme au mode d'emploi) ou de blessure de l'utilisateur, contacter le fabricant.
- » Tout flacon endommagé doit être éliminé conformément à la loi nationale en vigueur et aucun essai ne doit être réalisé à partir d'un tel réactif.
- » Manipuler tous les réactifs avec soin et porter un équipement de protection individuelle approprié.
- » Le formamide, la solution saline de citrate de sodium (SSC/Saline-Sodium Citrate) et le dodécyl sulfate de sodium (SDS) peuvent avoir des effets tératogènes et mutagènes : éviter toute inhalation, ingestion ou contact avec la peau.
- » Le DAPI est un irritant. Consulter le Material Safety Data Sheet (MSDS) du produit pour les informations concernant la sécurité.

Préparation des réactifs

Remarque: Utiliser de l'eau distillée pour la préparation de toutes les solutions-mères et de toutes les solutions de travail.

Série d'éthanol (70%, 85% et 100%): Préparer des dilutions vol/vol d'éthanol à 100% et d'eau distillée. Conserver à TA.

HCl 0,01N (acide chlorhydrique): Ajouter 0,5 mL de HCl 1N à 49,5 mL d'eau distillée. Conserver à TA. Préchauffer la solution à 37°C dans un bain-marie avant usage.

Solution-mère de pepsine à 0.4% (4 mg/mL): Dissoudre 100 mg de pepsine dans 25 mL de HCl 0.2N. Conserver des aliquots de 500 µL à -20°C.

Formaldéhyde à 1%: Ajouter 12,5 mL de formaline à 10% (4% formaldehyde) à 37 mL de PBS 1X. Ajouter 500 µL de MgCl₂ 100X. Conserver à 4°C jusqu'à une semaine.

SSC 0,5X(Citrate de sodium salin)/Tween 20 à 0,1%: Ajouter 25 mL de SSC 20X et 1 mL de Tween 20 à 974 mL d'eau distillée. Bien mélanger en tournant. Conserver à TA.

PBS 1X (solution saline dans un tampon phosphate): Mélanger 100 mL de PBS 10X et 900 mL d'eau distillée. Ajuster le pH à 7,0. Conserver à TA.

SSC 2X: Mélanger 100 mL de SSC 20X et 900 mL d'eau distillée. Ajuster le pH à 7,0. Conserver à température ambiante (TA).

SSC 2X/Tween 20 à 0,1%: Ajouter 100 mL de SSC 20X et 1 mL de Tween 20 à 899 mL d'eau distillée. Bien mélanger en tournant. Conserver à TA.

MgCl₂ 100X (Chlorure de magnésium) dans PBS 1X: Ajouter 50 µL de MgCl₂ 1M à 450 µL de PBS 1X.

Procédure Standard for FISH

Remarque: Produit prêt à l'emploi. Ne pas reconstituer ni diluer. Pour usage professionnel uniquement.

- » Seul(e) un(e) technologiste médical(e) familiarisé(e) avec les méthodes de cytogénétique et formé(e) à la technique FISH peut réaliser le test. Tout l'équipement doit être étalonné avant la réalisation du test.
- » Le tissu visé est du sang périphérique et la moelle osseuse. Les lames doivent être préparées conformément aux directives des méthodes cytogénétiques standards du laboratoire réalisant le test.

Préparation des lames

Toutes les lames fraîchement préparées doivent être vieilles pendant 1 heure et demie à 45 -50°C avant l'hybridation. Si l'hybridation n'a pas lieu le même jour que la préparation, conserver les lames à 4°C ou à -20°C. Les lames avec des cellules à cytoplasme visible peuvent nécessiter un prétraitement à l'aide d'un enzyme protéolytique du type pepsine (voir prétraitement facultatif à la pepsine).

Prétraitement facultatif des lames à la pepsine

1. Préchauffer 50 mL de HCl 0,01N à 37°C.
2. Ajouter 10 à 15 µL de solution-mère de pepsine à 0.4% aux 50 mL de HCl 0,01N préchauffés et incuber la lame pendant 5 à 10 min à 37°C dans la pepsine.

Remarque sur la procédure: Certains spécimens peuvent nécessiter des temps de digestion plus longs dans la pepsine.

3. Laver deux fois la lame pendant 5 min dans une solution PBS 1X à température ambiante (TA).
4. Incuber la lame pendant 5 min dans du formaldéhyde à 1% à TA.
5. Laver la lame pendant 5 min dans une solution PBS 1X à TA.
6. Déshydrater la lame dans de l'éthanol à 70%, 85% et 100% à TA pendant 1 min chacun.
7. Laisser sécher la lame à l'air libre.

Remarque sur la procédure: Vérifier la morphologie de l'échantillon à l'aide d'un microscope à contraste de phase avant l'hybridation. Ne pas hybrider en cas de compromission de la morphologie nucléaire.

Dénaturation/hybridation de la sonde DNA-FISH

1. Vortexer brièvement la sonde DNA-FISH et centrifuger le tube dans une microcentrifugeuse pendant 30 secondes.
2. Appliquer 10 µL de sonde DNA-FISH sur la zone cible sur la lame et la recouvrir d'une lamelle couvre-objet (22 x 22 mm).

Remarque sur la procédure: Prendre soin d'éviter toute formation de bulles d'air. Des lamelles couvre-objets plus petites ou plus grandes peuvent être utilisées en fonction du changement proportionnel de volume de la sonde DNA-FISH.

(Suite à la page suivante)

Procédure Standard for FISH

3. Sceller soigneusement les bords de la lamelle couvre-objet à l'aide de colle de caoutchouc.
4. Co-dénaturer la lame et la sonde DNA-FISH pendant 3 min à 80°C sur une plaque chauffante à température contrôlée.
5. Incuber pendant 12 à 18 heures dans une chambre humidifiée à 37°C, à l'abri de toute lumière directe.

Lavage post-hybridation

Remarque sur la procédure: Eviter de faire sécher la lame avant que le lavage soit fini.

1. Préchauffer les solutions de SSC 2X/Tween 20 à 0,1% et de SSC 0,5X/Tween 20 à 0,1% à 45°C.

2. Retirer la colle de caoutchouc de la lame à l'aide de pinces.
3. Tremper brièvement la lame dans la solution de SSC 2X à TA. Retirer la lamelle couvre-objet.
4. Laver la lame pendant 2 x 5 min dans une solution de SSC 2X/Tween 20 à 0,1% à 45°C.
5. Laver la lame pendant 2 x 5 min dans une solution de SSC 0,5X/Tween 20 à 0,1% à 45°C.
6. Rincer brièvement la lame dans de l'eau distillée.
7. Laisser sécher la lame à l'air libre à l'abri de la lumière directe.
8. Appliquer 20 µL de DAPI/Antifade à la zone hybridée et recouvrir d'une lamelle couvre-objet (25 x 25 mm).

Accessoires pour microscope

» Objectifs

Un objectif 10X est adapté au balayage de la zone cible. Un grossissement supérieur s'avère nécessaire pour l'analyse des signaux et doit avoir lieu avec un objectif à immersion à huile 63X ou 100X.

» Huile d'immersion

L'huile d'immersion doit être adaptée à la microscopie en fluorescence.

» Lampe

Une lampe à mercure de 100 watts avec une durée de vie maximale de 200 heures est recommandée. Remplacer la lampe avant qu'elle ne dépasse les 200 heures.

» Filtres recommandés

Fluorophore	Excitation _{max}	Émission _{max}
Verte	496 nm	520 nm
Rouge	580 nm	603 nm
DAPI	360 nm	460 nm

Visualisation et interprétation des signaux

Le signal doit être visualisé à l'aide d'un microscope à épifluorescence équipé des filtres appropriés.












Remarque sur la procédure: Les signaux peuvent être à différents plans focaux, c'est pourquoi il est important de focaliser vers le haut et vers le bas des spécimens, afin de s'assurer du comptage de tous les signaux.

- » Dans les noyaux normaux en interphase et les chromosomes en métaphase, la sonde DNA-FISH *IGH* «Break Apart» génère deux signaux de fusion (rouge/vert ou jaune) correspondant aux deux chromosomes 14 normaux.
- » Dans les cellules avec réarrangements chromosomiques mettant en jeu le gene *IGH*, le modèle le plus couramment observé est un signal de fusion représentant le chromosome 14 normal, ainsi qu'un signal rouge et un signal vert, représentant les chromosomes dérivés.

Recommandations et limitations

- » Ce produit a été optimisé pour être utilisé sur des lames préparées à partir de spécimens de sang périphérique, et de moelle osseuse conformément aux méthodes cytogénétiques courantes. Le fabricant garantit que ce produit répond aux caractéristiques de performance analytique (sensibilité, spécificité, reproductibilité et intervalle de validité) établies sur du sang périphérique normal ou des tissus prévus.
- » Chaque nouveau lot de sonde DNA-FISH doit être testé pour la spécificité du locus sur un spécimen de sang périphérique normal et sur le tissu prévu, pour vérifier la bonne performance du réactif. Il incombe au laboratoire d'établir les intervalles de validité à l'aide de spécimens de contrôle positifs et négatifs du tissu prévu.
- » L'utilisation de filtres aux caractéristiques spectrales autres que celles spécifiées peut affecter négativement la force du signal. Par exemple, le fluorophore rouge est visible à travers un filtre orange, mais les signaux apparaissent faibles.
- » La technique FISH sur métaphase est recommandée pour caractériser les variantes et les patrons de signaux anormaux atypiques.
- » Le test FISH est considéré comme une adjonction à la cytogénétique classique (caryotype). Les résultats de ces tests doivent être interprétés dans la totalité du contexte des antécédents cliniques du patient. Aucune décision médicale ne peut être prise en se fondant uniquement sur les résultats du test FISH.

Glossaire des symboles

 Numéro de lot	 Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
 Risques biologiques	 Conserver à l'abri de la lumière du soleil
 Numéro de catalogue	 Fabricant
 Attention, consulter la documentation d'accompagnement	 Limite supérieure de température
 Marquage CE de conformité	 Utiliser avant le
 Contient suffisamment pour 10 tests	



Cancer Genetics Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17
20122 Milano - Italia
www.cancergeneticsitalia.com
support@cancergeneticsitalia.com

DNA-FISH Probe fabriquée dans la communauté européenne par Cancer Genetics Italia S.r.l.

Bibliographie

1. Bernicot, L., et al. *Cytogenet Genome Res*, 2007. 118(2-4):345-52.
2. Moreau, P., et al. *Blood*, 2002. 100(5):1579-83.
3. Avet-Loiseau, H., et al. *Blood*, 2002. 99(6):2185-91.
4. Reddy, K. S. *Br J Haematol*, 2006. 132(6):705-22.
5. Haferlach, C., et al. *Leukemia*, 2007. 21(12):2442-51.